




Újratölthető  
hallásjavító készülék

Használati  
utasítások



MODEL VHP1303

## Termékbemutató

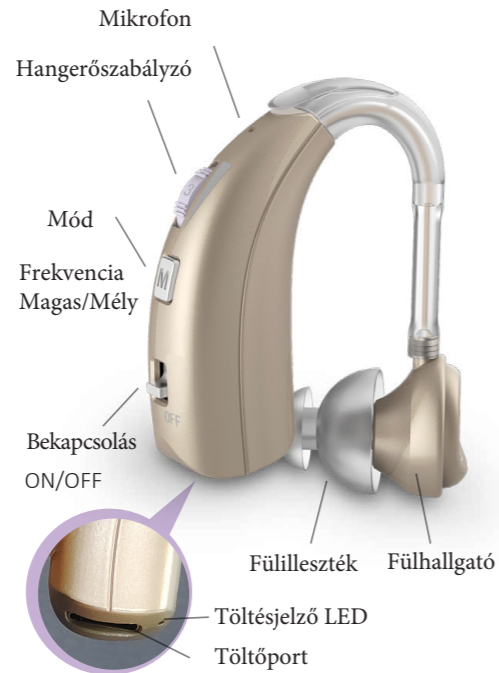

Első használatkor ajánlott az erősítőt teljesen feltölteni. (Kb. 1,5 óra időtartam)

## Csomag tartalma

VHP-1303 Tartozékok, 1 darabos csomagolásban:



Digitális  
hallásjavító erősítő  
x 1



Tisztítókefe x 1



Fülilleszték x 3



USB-C kábel x 1



Használati útmutató  
x 1

VHP-1303 Pachetul de 2 buc.:



Digitális hallásjavító  
erősítő x 2



Tisztítókefe x 1



Fülilleszték x 6




USB-C kábel x 1



Használati útmutató  
x 1

## Használati utasítások

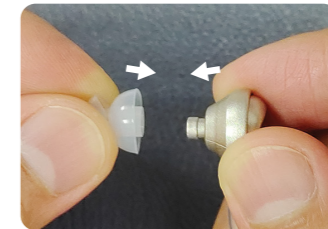

**1**  
Válassza ki a füléhez legjobban illeszkedő olívát, amely tökéletesen zár.



**2**  
A cső balra vagy jobbra forgatható, hogy mindkét fülhöz igazodjon.



**3**  
Helyezze a készüléket szorosan a fülébe, hogy elkerülje a visszacsatolást.



**4**  
Állítsa a hangerőt minimumra, majd kapcsolja be a készüléket.



**5**  
Állítsa a hangerőt a kívánt szintre, vagy szabályozza az M gombbal magasabbra vagy alacsonyabbra.



**6**  
Kikapcsolás után töltsse fel a készüléket a következő használathoz.

## Helyes használat

1. Válassza ki a megfelelő olivát, amely tökéletesen zár. Így elkerülheti a visszacsatolást és a kellemetlen éles hangokat.



2. Helyezze a terméket a fülébe az ábrán látható módon.



3. Kapcsolja be az erősítőt.
4. Használat előtt állítsa a hangerőt minimumra.
5. Válassza ki az M üzemmódot.
6. Finoman állítsa a hangerőt a kívánt szintre.
7. Használat után győződjön meg róla, hogy kikapcsolta a készüléket.
8. Töltse fel a készüléket a következő használathoz.

## Módváltás -M-

Nyomja meg az (M) gombot a Normál vagy a magas frekvencia mód kiválasztásához.

A módváltás lehetővé teszi a megfelelő frekvencia használatát a legjobb erősítés érdekében.

A készülék automatikusan Normál módban indul el.

### Normál mód (Csendes környezetben ajánlott)

Ha olyan környezetben tartózkodik, ahol alacsony a zajszint – például parkban, sétán vagy otthon –, a normál mód ajánlott.




### Magas mód (Zajos környezetben ajánlott)

Utazás közben vagy olyan helyeken, ahol magas a zajszint, a magas frekvencia mód a megfelelő választás. Ilyen esetekben a háttérzaj jelenléte normális.



## Töltési útmutató

1. Kapcsolja ki a készüléket, és csatlakoztassa a csomagban kapott töltőkábelt.
2. Dugja be az adaptert a konnektorba.

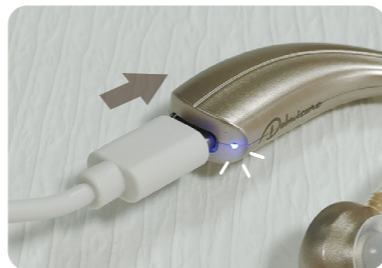

3. A kék fény jelzi, hogy a készülék töltődik. Teljes töltés után a fény zöldre vált. A töltési idő körülbelül 1,5 óra.
4. Ha a készüléket nem kapcsolja ki töltés előtt, piros fény jelenik meg, jelezve, hogy a készülék kikapcsol és nem töltődik.
5. Rendszeresen töltse fel a készüléket, hogy megőrizze az akkumulátor épségét és meghosszabbítsa az élettartamát.
6. Tilos a töltőt közvetlenül 110V-220V~50-60Hz áramforráshoz csatlakoztatni.
7. Azonnal hagyja abba a töltést, ha problémát tapasztal (például kellemetlen szag, füst vagy deformáció).
8. Az akkumulátor kapacitása körülbelül 60%-ra csökken 300 töltési-ürítési ciklus után.

## Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges megoldások
Torz hang	Csökkentse a hangerőt. Töltse fel a készüléket. Tisztítsa meg az olivát a fülzsirtól.
Gyenge hang	Töltse fel a készüléket. Tisztítsa meg a mikrofont. Ellenőrizze az olivát, nincs-e eltömődve.
Visszacsatolás vagy tartós sípolás	Helyezze vissza az olivát. Győződjön meg róla, hogy a készülék szorosan illeszkedik a fülébe. Csökkentse a hangerőt
Nincs hang	Ellenőrizze az olivát. Ellenőrizze a készülék épségét. Győződjön meg róla, hogy a termék nem sérült vagy törött.

## Műszaki adatok

MODEL	ITEM	UNIT	PARAMETER INDEX	
			VALUE	TOLERATE
VHP-1301 VHP-1303	Size	mm	37 x 18.5 x 10.2	
	Weight	g	6	
	Working Voltage	V	DC 3.7V	+5%,-10%
	Working Current	mA	≤ 1.5	
	Frequency Response	Hz	280- 3200	
	Maximum Saturation Acoustic Output	dB	≤ 128	+ 3dB
	Hi-frequency average value	dB	117	± 4dB
	Full-on Acoustic Gain	dB	34	± 5dB
	Total Harmonic Distortion	%	≤ 7	+ 3%
Equivalent Input Noise	dB	≤ 29	+ 3dB	

Device Safety Level Inner Power Level: B

## Figyelmeztetések

- Fontos, hogy fokozatosan növelje a hangerőt, hogy elkerülje az erős hangokat és a visszacsatolást.
- Gyermekek nem használhatják ezt a készüléket.
- Használja a csomagban található töltőt, vagy egy másik, az alábbi specifikációknak megfelelő töltőt.

INPUT: 100V~240V, AC 50/60Hz, 0.2-0.25A  
OUTPUT: 5V --- 1A

## Figyelmeztetések

1. A készülék nem vízálló. Kerülje a nedvességet. Ha a termék víznek volt kitéve, kapcsolja ki, és helyezze száraz, meleg helyre, hogy megszáradjon.
2. Csak akkor használja a terméket, amikor szükséges.
3. Kapcsolja ki a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja.
4. Ne használja a készüléket röntgen, MRI vagy CT vizsgálat során.

Figyelem: A Vhp-1303 hallásjavító erősítő nem orvosi eszköz. Javasolt szakorvoshoz fordulni a pontos diagnózis érdekében!

## Tárolás

Tárolja a készüléket száraz, jól szellőző helyen, ahol a relatív páratartalom nem haladja meg a 80%-ot. Kerülje a maró anyagoknak vagy gázoknak való kitétséget.

■ Gyártó: Foshan Vohom Technology Co., Ltd.  
Cím: Unit 402, 4/F 1 ENT A3 Bldg, Hantian Science and Technology City, No.17 Shenhai Rd., Guicheng Town, Nanhai District, Foshan, 528200, Guangdong, Kína.  
Forgalmazó: Terra Axis SRL  
Cím: Strada Ghidiceni nr.39, Bragadiru, Ilfov  
E-mail: contact@vixev.ro  
Ez a termék a vásárlás dátumától számított 24 hónapos garanciával rendelkezik. A garancia a gyártási hibákat és a hibás anyagokat fedezi. Ha a garanciális időszak alatt probléma merül fel, kérjük, forduljon a hivatalos forgalmazóhoz vagy a kijelölt szervizközpontoz.

A garancia igénybeviteléhez szükséges a vásárlást igazoló dokumentum (számla vagy nyugta) bemutatása. A garancia nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, balesetekből, jogosulatlan módosításokból vagy helytelen karbantartásból eredő hibákra.

